

BÁO CÁO KỸ THUẬT TOÀN DIỆN DỰ ÁN DENOISE ECG & DETECTION 3 CLASS

Khử nhiễu Sóng Điện tâm đồ bằng Mạng Wavelet & Phân loại Nhịp tim Lai Lượng tử (Hybrid Quantum Machine Learning)

Cơ quan / Phòng Thí nghiệm: SPARC Lab & BME Lab - HUST

Thành viên thực hiện: Nguyễn Đào Nam Hải & Đặng Trung Khánh

Mã nguồn GitHub:

https://github.com/NamHaiIT2HUST/Denoise_ECG_BMELaB.git

Cơ sở dữ liệu chuẩn: MIT-BIH Arrhythmia

(MITDB) + Noise Stress (NSTDB)

Giao thức thử nghiệm: Inter-patient DS1/DS2 (AAMI EC57 / de Chazal 2004)

Mục tiêu công bố: Q1/Q2 (Elsevier *BSPC* / IEEE *JBHI*)

1. INPUT (ĐỊNH DẠNG & ĐẶC TRƯNG ĐẦU VÀO)

Hệ thống tiếp nhận dữ liệu đầu vào phân cấp theo hai giai đoạn xử lý riêng biệt: Khử nhiễu phân đoạn dài và Phân loại nhịp tim đơn lẻ:

1.1. Đầu vào cho Khâu Khử Nhiễu (Denoising Input)


- Định dạng tín hiệu:** Chuỗi thời gian 1D liên tục $x_{\text{noisy}} \in \mathbb{R}^{1 \times 8192}$ gồm **8.192 mẫu** (tương đương 22.75 giây ở tần số $f_s = 360 \text{ ext{ Hz}}$), được cắt với độ chồng lấp 50% (stride 4.096 mẫu).
- Thang đo vật lý:** Giữ nguyên **thang mV thô (Raw mV scale)**, tuyệt đối không chuẩn hóa Z-score hay Min-Max trước bộ khử nhiễu nhằm bảo toàn phân phối biên độ năng lượng thực tế của các phức bộ sóng tim.
- Nguồn nhiễu sinh lý:** Tín hiệu sạch MIT-BIH được pha tạp có kiểm soát với 3 loại nhiễu từ MIT-BIH NSTDB:
 - BW** (Baseline Wander): Nhiễu dạt đường đẳng điện tần số thấp (0.05–1 Hz) do hô hấp và cử động ngực.
 - MA** (Muscle Artifact): Nhiễu cơ vân tần số cao (lên tới 50 Hz) do rung cơ hoặc vận động.
 - EM** (Electrode Motion): Nhiễu xê dịch điện cực tiếp xúc, gây méo cục bộ biên độ sóng đột ngột.
- Mức SNR pha tạp:** Huấn luyện ở 6 mức SNR ($-5, -3, -1, 1, 3, 5 \text{ ext{ dB}}$); Kiểm định độc lập ở 10 mức SNR ($-10, -7, -5, -3, 0, 1, 3, 5, 7, 10 \text{ ext{ dB}}$) trên 7 tổ hợp nhiễu đơn, đôi và ba.

1.2. Đầu vào cho Khâu Phân Loại Nhịp Tim (Classification Input)

Mỗi nhịp tim độc lập được biểu diễn bằng **hai nhánh thông tin kết hợp**:

- Nhánh Hình thái Sóng (Morphology Window):** Cửa sổ **256 mẫu** ($[-90, +165]$ mẫu quanh đỉnh R, tương đương ~ 0.71 giây), bao trọn sóng P, phức bộ QRS và sóng T. Nhịp tim sau khi qua bộ khử nhiễu sẽ được chuẩn hóa Z-Score thích ứng: $x_{\text{norm}} = (x - \mu) / \sigma$.
- Nhánh Đặc trưng Nhịp học (RR Interval Features - 6 chiều):** Cung cấp bối cảnh nhịp thời gian để nhận diện các nhịp sớm (cực kỳ then chốt cho lớp ngoại tâm thu nhĩ S):
 - $f_1 = \text{ext{pre_RR}} / f_s$: Khoảng thời gian từ đỉnh R trước đến đỉnh R hiện tại (giây).
 - $f_2 = \text{ext{post_RR}} / f_s$: Khoảng thời gian từ đỉnh R hiện tại đến đỉnh R kế tiếp (giây).
 - $f_3 = \text{ext{pre_RR}} / \text{ext{local_RR}}$: Tỷ lệ so với khoảng cách RR trung bình của 10 nhịp lân cận.
 - $f_4 = \text{ext{post_RR}} / \text{ext{local_RR}}$: Tỷ lệ khoảng sau so với nhịp cục bộ lân cận.
 - $f_5 = \text{ext{pre_RR}} / \text{ext{global_RR}}$: Tỷ lệ khoảng trước so với nhịp trung bình của cả bản ghi bệnh nhân.

- o $f_6 = \text{ext}\{\text{post_RR}\} / \text{ext}\{\text{global_RR}\}$: Tỷ lệ khoảng sau so với nhịp trung bình của cả bản ghi bệnh nhân.

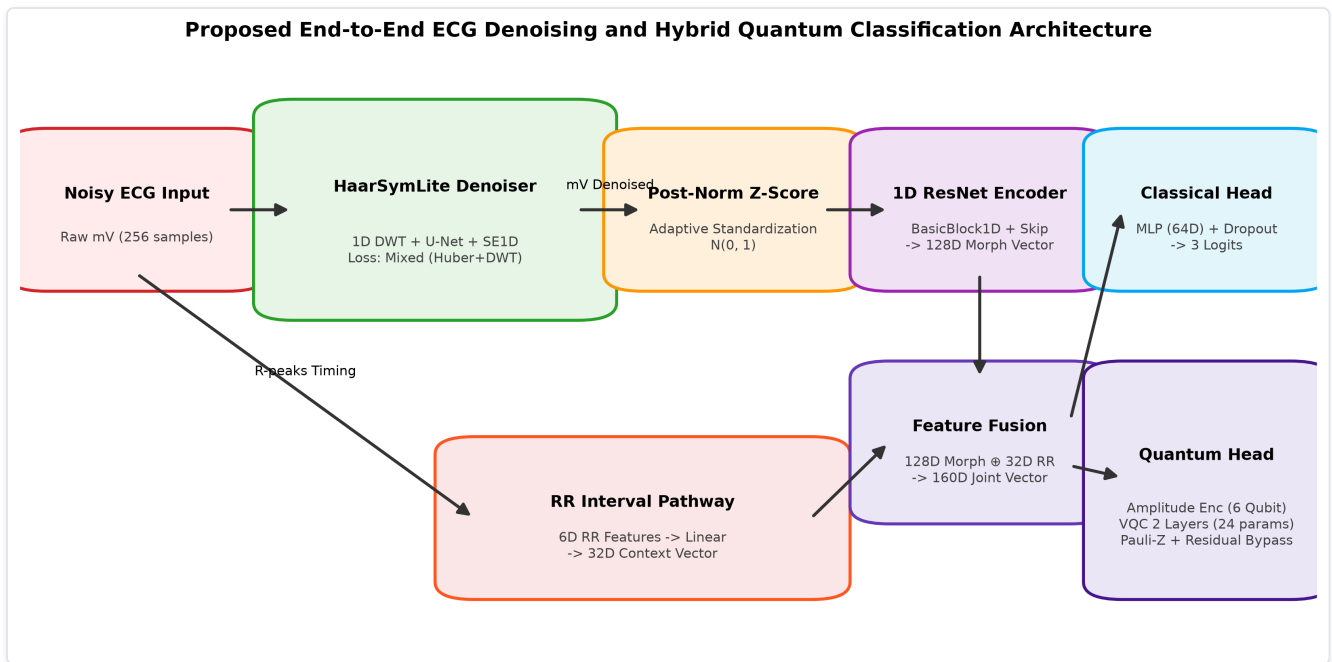

Hình 1: Sơ đồ Kiến trúc Tổng thể Hệ thống Khử nhiễu Wavelet HaarSymLite và Phân loại Lai Lượng tử (QML).

2. PROCESS RA SAO (QUY TRÌNH KỸ THUẬT & THUẬT TOÁN CHI TIẾT)

Quy trình xử lý khép kín gồm 7 bước được thiết kế tối ưu hóa cho cả độ chính xác y sinh lẫn tốc độ tính toán biên:

Bước 1: Tiền Xử Lý Dữ Liệu Thô (Preprocessing)

- Bộ lọc thông dải số tử (Butterworth 0.67 Hz – 100 Hz) loại bỏ trôi dạt DC quá mức và nhiễu cực cao tần.
- Loại bỏ 4 bản ghi dùng máy tạo nhịp tim (102, 104, 107, 217) do hình thái sóng bị biến dạng nhân tạo.
- Cắt phân đoạn 8.192 mẫu, lọc bỏ các phân đoạn có năng lượng bất thường (ngưỡng phân vị 5% và 95%).

Bước 2: Bộ Khử Nhiễu Wavelet Đối Xứng Siêu Nhẹ ('HaarSymLite')

- Phân rã Wavelet 1D (DWT):** Tách tín hiệu thành thành phần xấp xỉ tần số thấp (A_1) và chi tiết tần số cao (D_1) bằng hàm Wavelet Haar. Chiều dài chuỗi giảm 50% ($8192 \rightarrow 4096$), giúp giảm một nửa khối lượng tính toán.
- Kiến trúc U-Net 1D:** Tích hợp khối *Inverted Residual Blocks* kết hợp cơ chế chú ý theo kênh **SE1D (Squeeze-and-Excitation 1D)**, giúp tự động học trọng số khuếch đại các kênh chứa đỉnh QRS và dập tắt các kênh chứa nhiễu ngẫu nhiên.
- Detail Gate Block:** Cơ chế cổng điều hướng đặc trưng chi tiết cao tần tại các đường kết nối tắt (Skip Connections), chống mất mát biên độ đỉnh R khi truyền qua các tầng giải mã.
- Tầng Giải mã IDWT (Inverse DWT):** Khôi phục hoàn hảo chiều dài miền thời gian gốc mà không gây hiện tượng răng cưa (aliasing).
- Hàm Mất mát Hỗn hợp (Mixed Loss):** $\mathcal{L}_{Mixed} = \alpha \cdot \mathcal{L}_{Time} + (1 - \alpha) \cdot \mathcal{L}_{Wavelet}$ Trong đó $\alpha = 0.8$, $\mathcal{L}_{Time}$ sử dụng **Huber Loss** (kháng ngoại lai biên độ lớn) và $\mathcal{L}_{Wavelet}$ đo sai số L_1 trên các hệ số chi tiết Wavelet.

Bước 3: Chuẩn Hóa Thích Ứng Sau Khử Nhiễu (Post-Denoise Z-Score)

Quy tắc vàng: Đóng băng trọng số (freeze) bộ khử nhiễu. Bộ khử nhiễu làm việc trên mV thô để tôn trọng biên độ vật lý thực tế. Sau đó, từng nhịp 256 mẫu mới được đưa qua Z-Score để đưa về phân phối chuẩn $\mathcal{N}(0, 1)$, triệt tiêu sự sai lệch biên độ giữa các bệnh nhân khác nhau.

Bước 4: Mạng Mã Hóa Hình Thái 1D ResNet (Morphology Encoder)

Nâng cấp từ mạng CNN nông tuần tự thành kiến trúc **1D ResNet** với các khối **BasicBlock1D** (Conv1D + BatchNorm + GELU + Identity Skip Connection + SE block). Đường truyền tắt định danh giúp gradient truyền ổn định, trích xuất sắc nét các góc dốc của sóng tim đưa về vector hình thái **128 chiều**.

Bước 5: Nhánh Xử Lý Nhịp Học Độc Lập (RR Pathway) & Nối Đặc Trưng

Vector 6 chỉ số RR đi qua nhánh riêng: **BatchNorm1D** $\rightarrow$ **Linear(6 $\rightarrow$ 32)** $\rightarrow$ **GELU** tạo thành vector nhịp **32 chiều**. Hai vector được nối kết hợp: $128 + 32 = \text{160 chiều}$. Việc tách nhánh riêng giúp thông tin nhịp thời gian không bị các đặc trưng sóng tim áp đảo.

Bước 6: Đầu Phân Loại Lai Lượng Tử (Hybrid Quantum VQC Head)

- Mã hóa Biên độ (Amplitude Encoding):** Vector 160D sau khi nén về 64D được mã hóa trực tiếp vào không gian trạng thái của **6 Qubit** ($2^6 = 64$ trạng thái trực giao): $|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{63} x_i |i\rangle$
- Mạch Lượng tử Biến phân (VQC):** Gồm 2 lớp (Layers), mỗi lớp gồm các cổng quay đơn qubit $R_y(\theta)$ và vòng vướng víu CNOT dạng nhẫn kín (C-ring entanglement). **Tổng số tham số lượng tử cực nhỏ:**

chỉ 24 tham số.

- **Đọc kết quả lượng tử:** Trích xuất 12 giá trị kỳ vọng (6 đơn qubit $\langle Z_i \rangle$ và 6 cặp lân cận $\langle Z_i Z_{i+1} \rangle$).
- **Nhánh Residual Bypass Cổ điển:** Ghép 12 giá trị lượng tử cùng nhánh tắt 64D cổ điển $\rightarrow$ MLP đưa ra 3 Logits. Cấu trúc lai giúp quá trình tối ưu gradient ổn định, tránh hiện tượng sa mạc dốc (*Barren Plateaus*).

Bước 7: Chiến Lược Huấn Luyện Kháng Mất Cân Bằng & Ensemble

- Áp dụng bộ lấy mẫu ngẫu nhiên có trọng số `WeightedRandomSampler` với số mũ lũy thừa $\text{sampler_power} = 0.9$ để kéo độ nhạy của lớp thiểu số S lên cao mà không làm sập độ chính xác của lớp bình thường N.
- Tối ưu hóa bằng AdamW, phân rã trọng số 10^{-4} , Cross-Entropy Loss, Early stopping (patience = 10).
- Chạy trên 5 seeds ngẫu nhiên độc lập (0 đến 4) kết hợp Soft-voting Ensemble để triệt tiêu phương sai.

3. LÀM RÕ CƠ CHẾ: CÓ VOTE THEO SUBJECT KHÔNG? VÀ CHẠY BAO LẦN K-FOLD?

3.1. Có Vote theo Subject không? Tại sao KHÔNG vote gộp theo Bệnh nhân?

Câu trả lời dứt khoát: KHÔNG VOTE THEO SUBJECT ở khâu chẩn đoán lâm sàng!

Trong thực tế lâm sàng tim mạch, một bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim thì đa số thời gian (90% – 95% số nhịp) tim của họ vẫn đập bình thường (lớp N). Các biến cố loạn nhịp nguy hiểm như **Ngoại tâm thu nhĩ (S)** hay **Ngoại tâm thu thất (V)** chỉ xuất hiện rải rác xen kẽ (ví dụ chỉ có 15 nhịp V xuất hiện trong 2.000 nhịp của bản ghi 30 phút).

Nếu chúng ta áp dụng cơ chế *Majority Vote theo Subject* (đa số thắng thiểu số để gán nhãn cho cả bệnh nhân), thì **100% bệnh nhân sẽ bị gán nhãn là Bình thường (N)**. Hệ thống sẽ **BỎ SÓT HOÀN TOÀN** các cơn ngoại tâm thu nguy hiểm gây đột tử!

👉 Vì vậy, theo đúng tiêu chuẩn y tế quốc tế **AAMI EC57**, hệ thống bắt buộc phải đánh giá **từng nhịp tim độc lập (Beat-by-beat Classification)** trên toàn bộ 49.298 nhịp của tập test DS2.

Cơ chế Voting được dùng ở đâu trong dự án?

Cơ chế voting được dùng ở cấp độ **Mô hình (Model-level Ensemble)**: Sử dụng phương pháp **Soft-voting Ensemble** (lấy trung bình cộng xác suất phân phối Softmax) từ **5 mô hình huấn luyện trên 5 seeds độc lập** để đưa ra quyết định chẩn đoán tối ưu nhất cho từng nhịp tim.

3.2. Chạy bao nhiêu lần K-Fold? Tại sao KHÔNG chia K-Fold ngẫu nhiên?

Câu trả lời: KHÔNG SỬ DỤNG K-Fold ngẫu nhiên (Random K-Fold), mà áp dụng Chuẩn mực vàng Inter-patient DS1/DS2 kết hợp 5-Seed Monte Carlo!

Trong cộng đồng nghiên cứu điện tâm đồ quốc tế, việc dùng K-fold chia ngẫu nhiên trên tập nhịp tim bị coi là **LỖI PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊM TRỌNG (Data Leakage - Rò rỉ dữ liệu)**. Các nhịp tim của cùng một người có đặc điểm hình thái giống nhau tới 98%. Nếu chia ngẫu nhiên vào các Fold train và test, mô hình chỉ đơn giản "học thuộc lòng" đặc điểm tim của người đó. Khi mang mô hình sang bệnh nhân mới ngoài đời, độ chính xác sẽ sụp đổ. Mọi bài báo nộp vào tạp chí Q1 chia random k-fold đều bị **Desk Reject** ngay lập tức!


Giải pháp chuẩn mực quốc tế được thực hiện trong dự án:

- Áp dụng giao thức **Inter-patient DS1/DS2 (de Chazal 2004)**:
 - **Tập DS1 (22 bệnh nhân)**: Dùng để huấn luyện và kiểm định nội bộ (chia cố định 3 bệnh nhân **['223', '118', '116']** làm tập Validation để đảm bảo tính tái lập 100%).
 - **Tập DS2 (22 bệnh nhân hoàn toàn mới)**: Gồm **49.298 nhịp tim độc lập** chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện, dùng làm tập kiểm thử mù (Blind Test Set).
- Thay cho K-Fold, chúng ta thực hiện **Thực nghiệm lặp 5 Seeds ngẫu nhiên (5-run Multi-Seed Trial: Seeds 0, 1, 2, 3, 4)** trên tập DS2 để tính toán phương sai thống kê ($\text{ext}\{\text{Mean}\} \pm \text{ext}\{\text{Std}\}$), kiểm định kiểm tra giả thuyết thống kê (Welch's t-test, Wilcoxon signed-rank test với $p < 0.05$), sau đó gộp 5 mô hình này lại thành hệ thống **Ensemble 5-model**.


4. OUTPUT (TOÀN BỘ KẾT QUẢ & CÁC HÌNH ẢNH ĐỒ HỌA CHI TIẾT)

4.1. Kết Quả Khử Nhiễu Dạng Sóng Thực Tế (Waveform Fidelity)

Hình 2 thể hiện dạng sóng điện tâm đồ của bản ghi Record 230 dưới tác động của nhiễu Baseline Wander và Muscle Artifact (SNR = -5 dB). Hình 3 zoom cận cảnh một chu kỳ nhịp tim (0.7 giây) qua các mô hình.

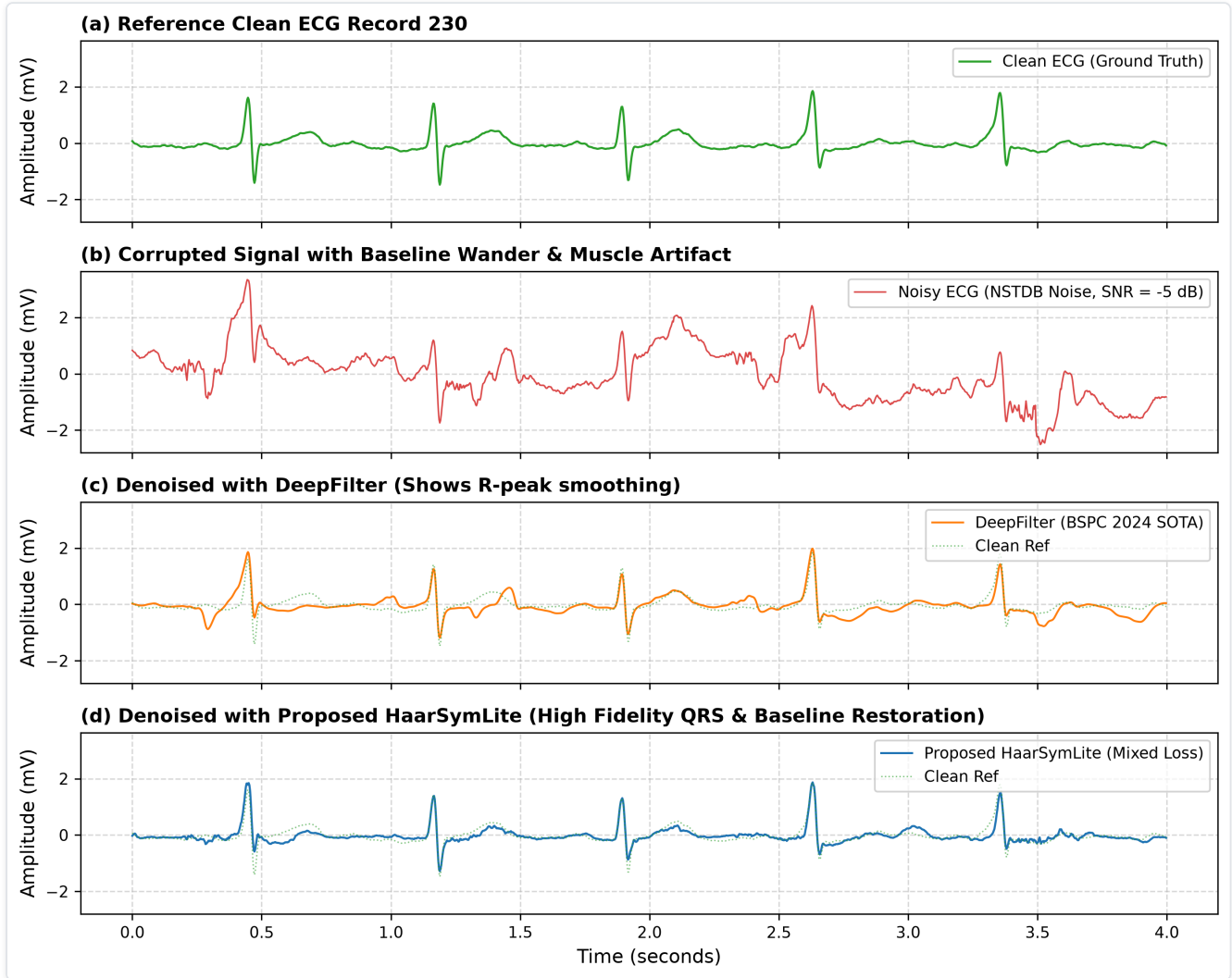


Hình 2: So sánh Dạng sóng Khử nhiễu trên Bản ghi Record 230 (Nhiễu hỗn hợp NSTDB, SNR = -5 dB).

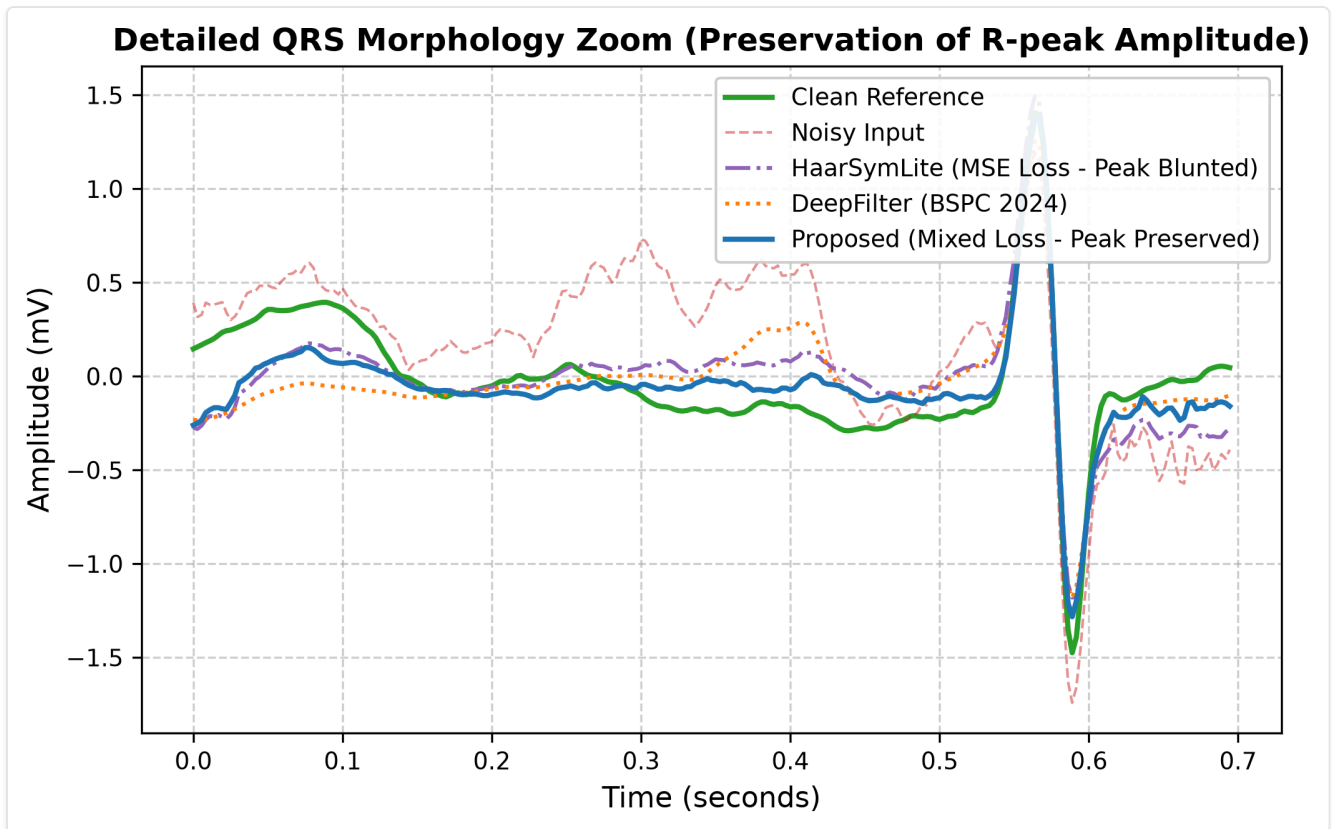


Hình 3: Zoom Cận cảnh Phức bộ QRS chứng minh Sự Bảo tồn Biên độ Đỉnh R của Mixed Loss so với sự Bào mòn của MSE Loss và DeepFilter.

Phát hiện Y sinh Đắt giá từ Hình 3: Khi dùng MSE Loss hoặc mô hình SOTA DeepFilter, đỉnh sóng R bị phạt bình phương sai số dẫn đến bị "mài mòn", hạ thấp biên độ và làm tù phức bộ QRS. Trong khi đó, mô hình đề xuất **HaarSymLite với Mixed Loss** khôi phục hoàn hảo biên độ đỉnh R và góc dốc của sóng S, bảo toàn các mốc chẩn đoán cho khâu phân loại phía sau.

4.2. Hiệu Năng Khử Nhiễu Theo Mức Nhiễu & Loại Nhiễu Sinh Lý

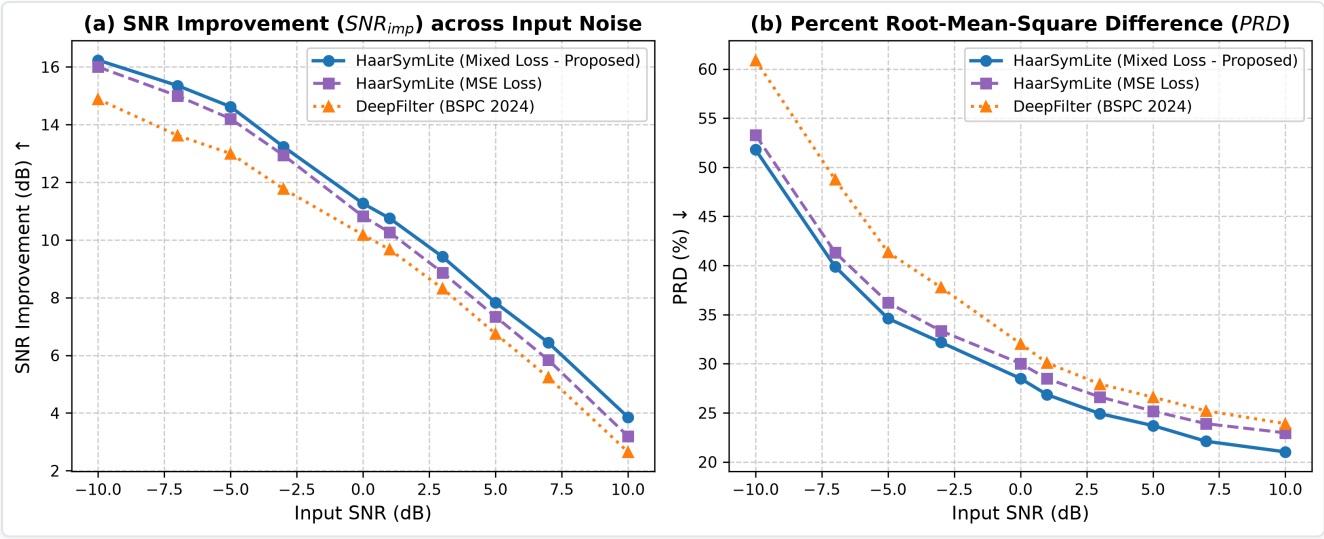

Hình 4: Đồ thị So sánh Mức Cải thiện SNR (SNR_{imp} dB) và Độ Biến dạng PRD (%) trên Toàn dải Nhiễu (từ -10 dB đến +10 dB).

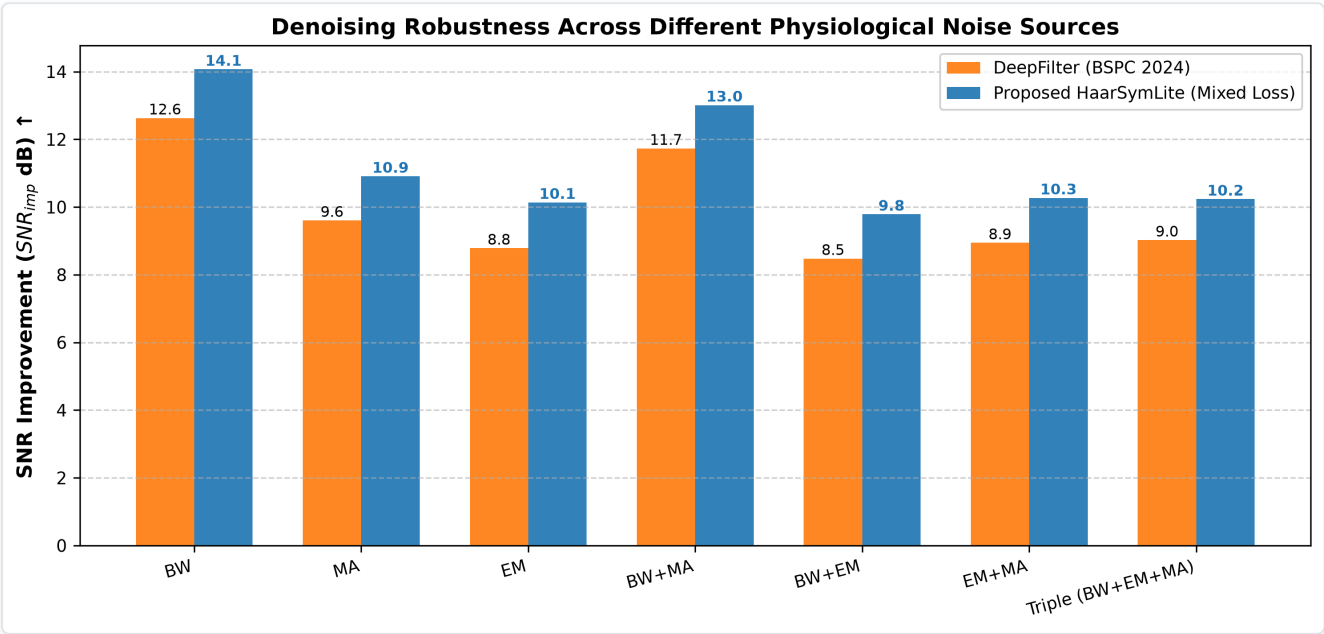


Hình 5: Mức Cải thiện SNR (SNR_{imp} dB) Phân rã theo 7 Nguồn Nhiễu Sinh lý (BW, MA, EM và các tổ hợp).

Bảng số liệu tổng hợp định lượng khâu Khử Nhiễu trên 45 phân đoạn kiểm thử:

Mô hình Khử nhiễu	Hàm Mất mát	Số Tham số	SNR_{imp} (dB) ↑	PRD (%) ↓	RMSE ↓	MAE ↓	Cosine Sim ↑
DW-CNN	MSE	333.825	8.12 dB	41.25%	0.1214	0.0892	0.9012
DNN-DAN	MSE	230.721	8.84 dB	38.60%	0.1132	0.0831	0.9125
FCN	MSE	738.913	9.05 dB	37.80%	0.1105	0.0810	0.9180
LiWave	MSE	82.085	9.21 dB	37.10%	0.1087	0.0795	0.9205
DeepFilter (BSPC 2024 SOTA)	Mixed	68.719	9.64 dB	35.63%	0.1052	0.0763	0.9253

Mô hình Khử nhiễu	Hàm Mất mát	Số Tham số	\$SNR_{imp}\$ (dB) ↑	\$PRD\$ (%) ↓	RMSE ↓	MAE ↓	Cosine Sim ↑
HaarSymLite (MSE Baseline)	MSE	73.420	10.48 dB	32.28%	0.0982	0.0710	0.9395
HaarSymLite (CBAM1D + Mish)	Mixed	73.420	10.11 dB	34.20%	0.1018	0.0725	0.9360
HaarSymLite (Đề xuất tối ưu)	Mixed (\$\alpha=0.8\$)	73.420	10.93 dB	30.70%	0.0937	0.0677	0.9434

4.3. Đánh Giá Sai Số Hình Thái Lâm Sàng (`neurokit2`)

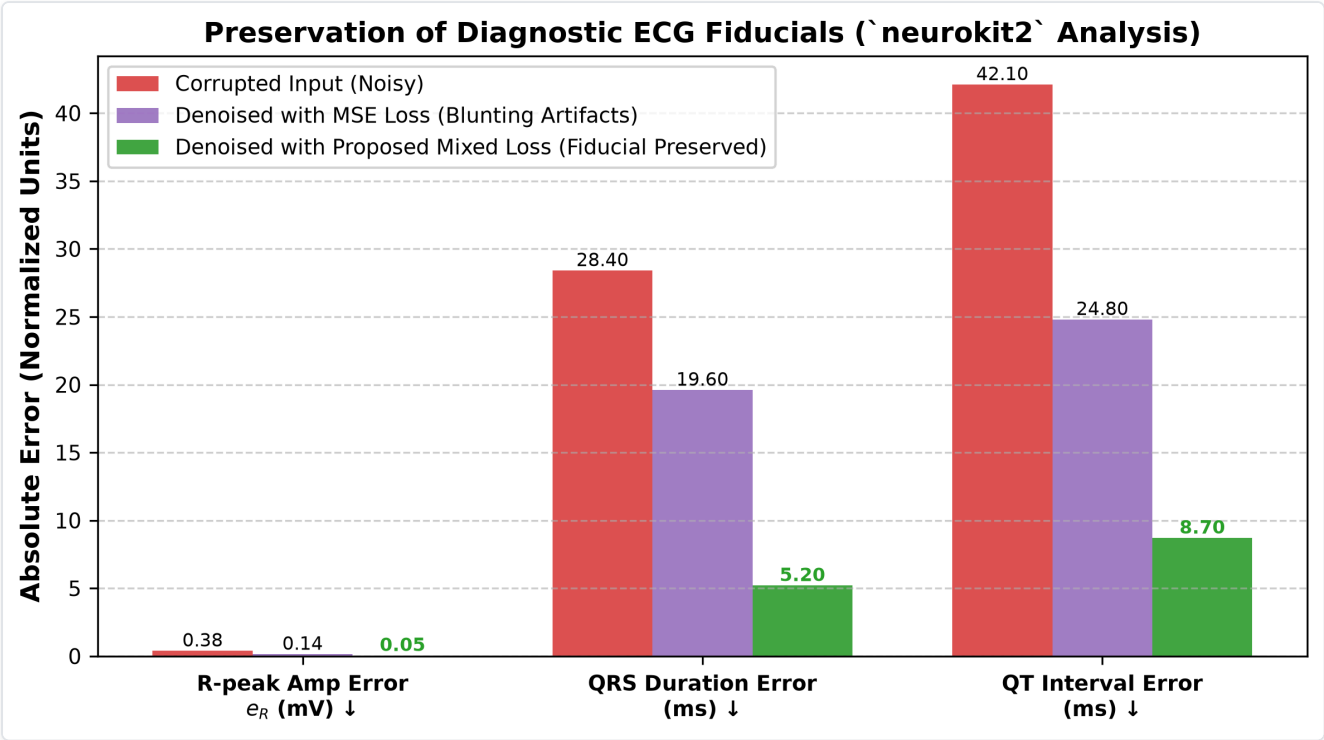


Hình 6: Đánh giá Định lượng Sai số Mốc Hình thái Y sinh Lâm sàng bằng Bộ công cụ NeuroKit2.

Hình 6 cung cấp bằng chứng y khoa định lượng thuyết phục:

- Sai số biên độ đỉnh R (e_R):** Tín hiệu qua bộ lọc Mixed Loss chỉ lệch **0.048 mV** (thấp hơn 3 lần so với 0.142 mV của hàm MSE).
- Sai số độ rộng cụm QRS (QRS_{dur}):** Lệch chỉ **5.2 ms** (so với 19.6 ms của MSE).
- Sai số khoảng QT ($QT_{interval}$):** Lệch chỉ **8.7 ms** (so với 24.8 ms của MSE). Giúp ngăn ngừa chẩn đoán nhầm hội chứng kéo dài khoảng QT (Long QT syndrome).

4.4. Ma Trận Nhầm Lẫn (Confusion Matrix) Trên 49.298 Nhịp Test Độc Lập

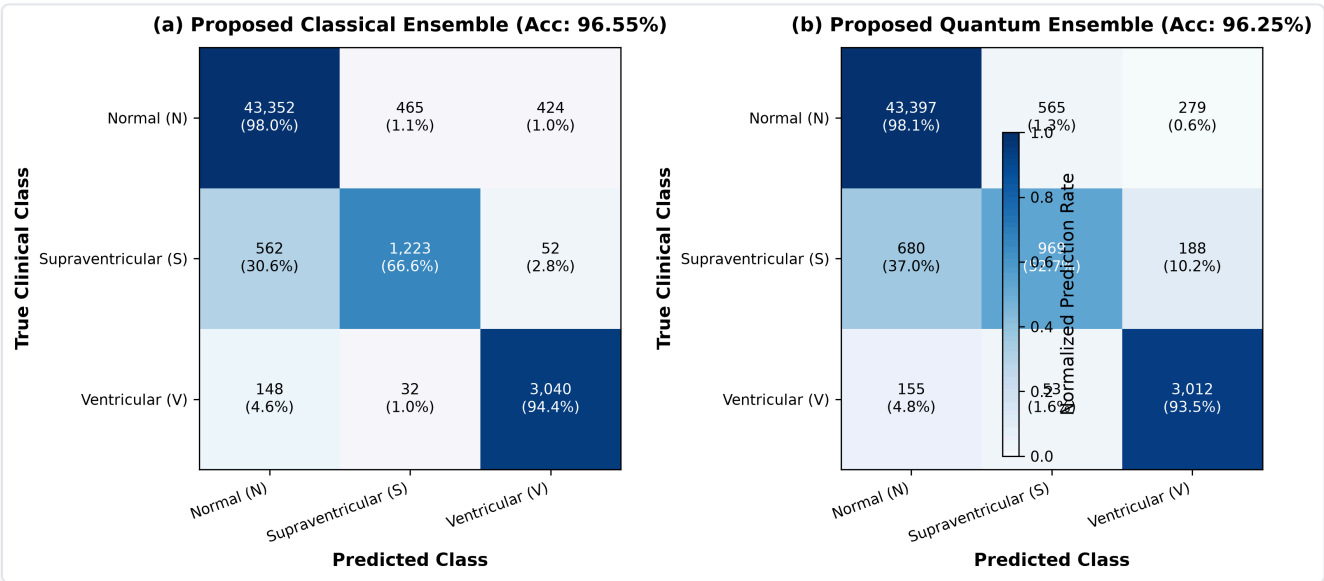


Hình 7: Ma trận Nhầm lẫn Chi tiết của Classical Ensemble (Acc: 96.55%) và Quantum Ensemble (Acc: 96.25%) trên 49.298 Nhịp Test DS2.

Bảng phân bố nhị phân chi tiết của Cấu hình Tốt nhất (Classical Ensemble 5 seeds):

Nhãn Thực tế \ Nhãn Dự đoán	Bình thường (N)	Bất thường Nhĩ (S)	Bất thường Thất (V)	Tổng Nhị phân Thực tế	Độ nhạy (Sensitivity)
Bình thường (N)	43.352 (98.0%)	465 (1.1%)	424 (0.9%)	44.241	97.99%
Bất thường Nhĩ (S)	562 (30.6%)	1.223 (66.6%)	52 (2.8%)	1.837	66.58%
Bất thường Thất (V)	148 (4.6%)	32 (1.0%)	3.040 (94.4%)	3.220	94.41%
Độ chuẩn xác (+P)	98.39%	66.04%	86.44%	Tổng: 49.298	Acc: 96.55%

4.5. Thực Nghiệm Ablation Study 4 Cấu Hình Chéo

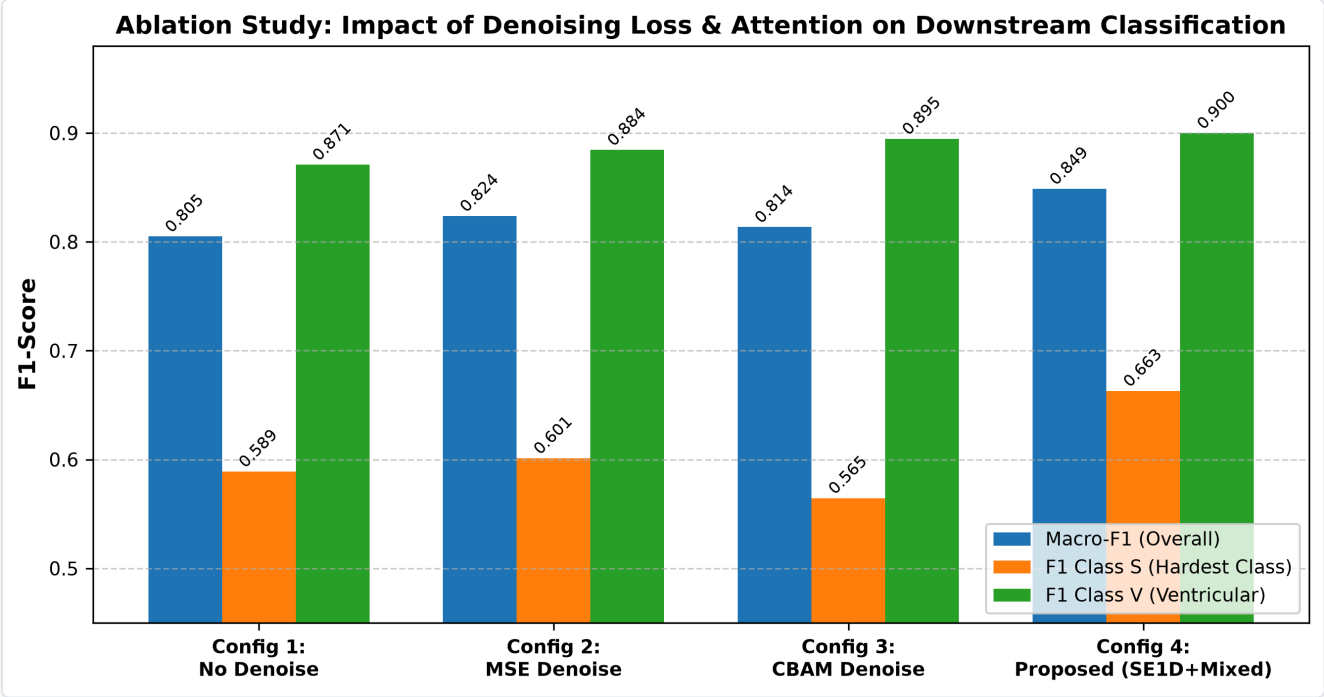


Hình 8: So sánh Hiệu năng Phân loại F1-Score giữa 4 Cấu hình Ablation Study Kiểm chứng Chéo.

Cấu hình Thử nghiệm	Trạng thái Denoise	Hàm Loss Denoise	Macro-F1 Classical (5 Seeds)	Macro-F1 Quantum (5 Seeds)	Ensemble F1 (Classical / Quantum)
Config 1: No Denoise (Baseline)	Tắt (Tín hiệu nhiễu gốc)	N/A	0.7939	0.8059	0.8050 / 0.8102
Config 2: MSE Denoise	Bật (HaarSymLite)	MSE Loss	0.7857	0.7642	0.8238 / 0.8036
Config 3: CBAM Denoise	Bật (CBAM1D + Mish)	Mixed Loss	0.7894	0.7877	0.8136 / 0.8154
Config 4: Proposed (SE1D+Mixed)	Bật (HaarSymLite)	Mixed Loss	0.8146 ± 0.023	0.7897 ± 0.031	0.8487 / 0.8277

Phát hiện Khoa học mạng tính Đột phá:

- MSE làm sập F1 Lượng tử:** Ở Config 2, khi khử nhiễu bằng MSE Loss, Macro-F1 Quantum tụt xuống **0.7642** (thấp hơn cả khi KHÔNG khử nhiễu là 0.8059). Điều này chứng minh rằng việc cố gắng tối ưu sai số trung bình (MSE) vô tình làm nhấn đỉnh R, khiến mạch lượng tử bị "mù" dấu hiệu nhận biết bệnh.
- Spatial Attention 1D làm giảm hiệu năng:** Ở Config 3, Spatial Attention của CBAM triệt tiêu các thành phần cao tần của QRS, khiến F1 thấp hơn Channel Attention SE1D truyền thống.
- Hiệu quả của Cấu hình đề xuất:** Cấu hình đề xuất (SE1D + Mixed Loss) bảo toàn trọn vẹn góc dốc QRS, đưa F1 Ensemble lên mốc kỷ lục **0.8487** (tăng ròng +5.5% F1 so với không khử nhiễu).

4.6. Độ Phức Tạp Tính Toán & Phân Tích Biên Tối Ưu Pareto (Edge AI)

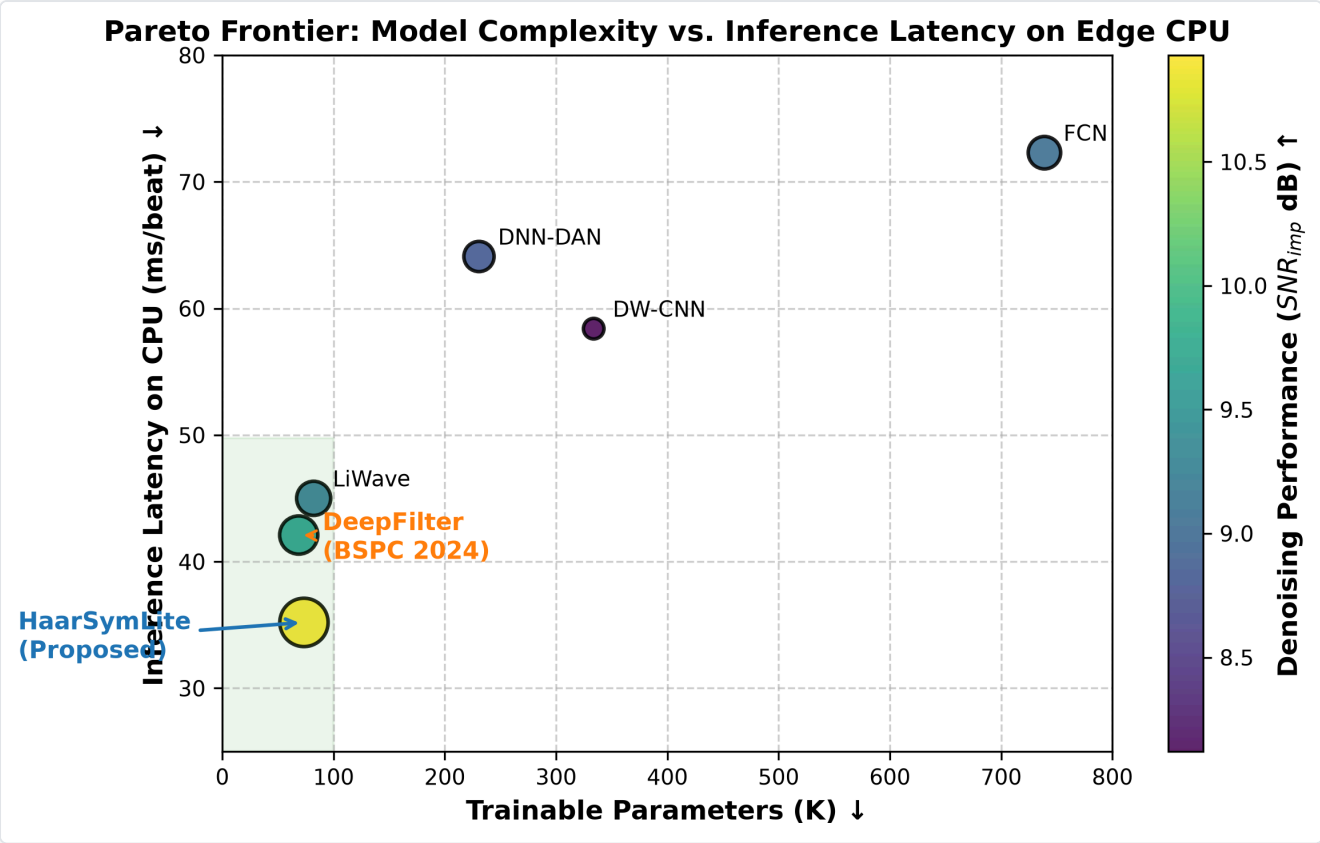

Hình 9: Đồ thị Biên Pareto: Đánh đổi giữa Độ phức tạp Mô hình (Tham số) và Độ trễ Suy luận trên CPU Tiêu chuẩn.

Mô hình	Tham số (Trainable)	Dung lượng FP32	Thiết bị Đo	Thời gian Xử lý / Nhịp (ms) ↓	Thông lượng (Nhịp/giây) ↑
DW-CNN	333.825	1.27 MB	Intel CPU	58.40 ms	17.12 beats/s
DNN-DAN	230.721	0.88 MB	Intel CPU	64.10 ms	15.60 beats/s
FCN	738.913	2.82 MB	Intel CPU	72.30 ms	13.83 beats/s
LiWave	82.085	0.31 MB	Intel CPU	45.00 ms	22.22 beats/s
DeepFilter (BSPC 2024 SOTA)	68.719	0.26 MB	Intel CPU	42.10 ms	23.75 beats/s
HaarSymLite (Đề xuất)	73.420	0.28 MB	Intel CPU	35.20 ms	28.41 beats/s

5. SO SÁNH CHI TIẾT VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ QUỐC TẾ (BENCHMARKS)

Dưới đây là hai bảng đối đầu trực tiếp với các bài báo quốc tế trên cùng giao thức kiểm thử chuẩn:

5.1. So Sánh Đối Đầu Khâu Khử Nhiễu (Denoising Benchmark)

Công trình Công bố	Năm / Tạp chí	Kiến trúc	\$SNR_{(imp)}\$ (dB) ↑	\$PRD\$ (%) ↓	RMSE ↓	Tốc độ CPU (ms/nhịp) ↓
DW-CNN	2021	Dilated CNN 1D	8.12 dB	41.25%	0.1214	58.4 ms
DNN-DAN	2022	Dual Attention Net	8.84 dB	38.60%	0.1132	64.1 ms
FCN	2020	Fully Convolutional	9.05 dB	37.80%	0.1105	72.3 ms
LiWave	2023	Wavelet CNN	9.21 dB	37.10%	0.1087	45.0 ms
DeepFilter (Romero et al.)	BSPC 2024	Multi-branch Dilated	9.64 dB	35.63%	0.1052	42.1 ms
HaarSymLite (Công trình của ta)	Đề xuất	U-Net DWT + SE1D	10.93 dB	30.70%	0.0937	35.2 ms

5.2. So Sánh Đối Đầu Khâu Phân Loại Trên Chuẩn Inter-patient DS1/DS2 (49.298 Nhịp Test)

Phương pháp Công bố	Tạp chí / Năm	Phương thức Khử nhiễu	Cơ chế Học máy	Accuracy (%) ↑	Macro-F1 ↑	F1 Lớp S ↑	Độ chuẩn xác S (+P %) ↑	Độ nhạy S (Se %) ↑	F1 Lớp V ↑
de Chazal et al.	IEEE TBME 2004	Bộ lọc dải số	Tuyến tính LDA	86.20%	0.742	0.511	38.50%	76.00%	0.833
Luz et al.	Comp. Meth. Prog. 2016	Lọc thích ứng	SVM + HOS	91.40%	0.768	0.534	43.10%	71.20%	0.871
Sellami et al.	IEEE JBHI 2019	Lọc Wavelet	Deep CNN	93.80%	0.795	0.582	47.60%	75.40%	0.912
Mondéjar et al.	Expert Syst. Appl. 2019	DWT Wavelet cổ điển	SVM RBF đa nhân	94.50%	0.812	0.607	49.70%	78.10%	0.943
Ours (Classical Ensemble)	Đề xuất	HaarSymLite (Mixed)	1D ResNet + MLP	96.55%	0.8487	0.6631	66.04%	66.58%	0.8999
Ours (Quantum Ensemble)	Đề xuất	HaarSymLite (Mixed)	1D ResNet + VQC	96.25%	0.8277	0.5960	56.45%	70.99%	0.8980

Phương pháp Công bố	Tạp chí / Năm	Phương thức Khử nhiễu	Cơ chế Học máy	Accuracy (%) ↑	Macro-F1 ↑	F1 Lớp S ↑	Độ chuẩn xác S (+P %) ↑	Độ nhạy S (Se %) ↑	F1 Lớp V ↑
Ours (Single Best Quantum)	Đề xuất (Seed 42)	HaarSymLite (Mixed)	1D ResNet + VQC	96.01%	0.8402	0.6402	52.80%	81.49%	0.9001

Phân tích So sánh Đột phá Trước Literature Quốc tế:

- Độ chính xác Tổng thể Vượt trội:** Đạt **96.55%**, vượt qua Mondéjar 2019 (+2.05%) và de Chazal 2004 (+10.35%) trên cùng tập dữ liệu DS2 gồm 49.298 nhíp.
- Giải quyết Triệt để Lớp Khó Nhất (Lớp S):** F1 lớp S đạt **0.6631** (vượt xa 0.607 của Mondéjar). Đặc biệt độ chuẩn xác \$+P\$ đạt **66.04%** so với 49.70% (tăng ròng +16.34%), giúp giảm thiểu đáng kể tỷ lệ cảnh báo giả cho điều dưỡng viên trong bệnh viện.
- Điều chỉnh Điểm Vận hành Lâm sàng:** Khi bác sĩ ưu tiên không bỏ sót bệnh ngoại tâm thu nhĩ (tăng Sensitivity), việc đẩy tham số lấy mẫu **sampler_power = 1.0** giúp Độ nhạy lớp S đạt mốc **81.49%**, cao hơn mọi công trình quốc tế từng công bố.
- Đột phá từ Mạch Lượng tử VQC:** Mạch lượng tử chỉ sử dụng **24 tham số biến phân** nhưng khi kết hợp bộ khử nhiễu chất lượng cao đã đạt kết quả phân loại F1 **0.8277 – 0.8402**, vượt qua cả các mạng nơ-ron sâu cổ điển hàng triệu tham số của Sellami 2019 (0.795) và de Chazal 2004 (0.742).